1.3. Эффект Рамзауэра —

— рассеяние медленных электронов на атомах Дополнительное описание

Экспериментальная установка. В нашей работе для изучения эффекта Рамзауэра используется тиратрон $T\Gamma 3-01/1.3$ Б, заполненный инертным газом. Схематическое изображение тиратрона и его конструкция приведены на рис. 6.

Электроны, эмитируемые катодом тиратрона, ускоряются напряжением V, приложенным между катодом и ближайшей к нему сеткой. Затем электроны рассеиваются на атомах инертного газа. Все сетки 1, 2, 3 соединены между собой и имеют одинаковый потенциал, примерно равный потенциалу анода 6. Поэтому между первой сеткой 1 и анодом практически нет поля. Рассеянные электроны отклоняются в сторону и уходят на сетку, а оставшаяся часть электронов достигает анода и создаёт анодный ток I_a . Та-

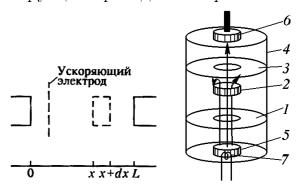


Рис. 6. Схема тиратрона (слева) и его конструкция (справа): 1, 2, 3 — сетки, 4 — внешний металлический цилиндр, 5 — катод, 6 — анод, 7 — накаливаемая спираль

ким образом, поток электронов N(x) на расстоянии x от ускоряющей сетки (т.е. число электронов, проходящих через поперечное сечение лампы в точке x в единицу времени) уменьшается с ростом x от начального значения N_0 у катода (в точке x=0) до некоторого значения N_a у анода (в точке x=L).

Рассмотрим теперь, какова должна быть реальная вольт-амперная характеристика (BAX) тиратрона. Выделим в газе на расстоянии x тонкий слой с площадью поперечного сечения S и толщиной dx. Этот слой содержит $\nu=n_aS\,dx$ атомов газа (n_a — концентрация атомов газа в лампе). Суммарная рассеивающая поверхность этих атомов $\Delta=\nu\Delta_a$, где Δ_a — площадь поперечного сечения атома. Обозначим через dN убыль потока электронов в результате прохождения слоя dx; тогда dN/N(x) есть доля электронов, которые рассеялись, или вероятность рассеяния в слое. Для рассеяния электрона в слое необходимо выполнение двух независимых событий — электрон должен «наткнуться» в слое на атом, и, кроме того, он должен на этом атоме рассеяться. Следовательно, вероятность dN/N(x) рассеяния электрона в слое равна произведению двух вероятностей — вероятности для электрона в слое dx встретить атом газа (она равна Δ/S — доли площади поперечного сечения слоя, перекрываемого атомами) и вероятности рассеяния на атоме w(V):

$$-\frac{dN}{N(x)} = \frac{\Delta}{S}w(V) = n_a \Delta_a w(V) dx. \tag{10}$$

Интегрируя это соотношение от 0 до L и заменяя поток электронов на ток I=Ne, получаем уравнение BAX:

$$I_a = I_0 e^{-Cw(V)}, \qquad C = L n_a \Delta_a, \tag{11}$$

где $I_0 = eN_0$ — ток катода, $I_a = eN_a$ — анодный ток.

Согласно классическим представлениям, сечение рассеяния электрона на атоме должно падать монотонно с ростом V (обратно пропорционально скорости электрона, т.е. обратно пропорционально корню квадратному из его энергии), а значит ВАХ будет монотонно возрастающей функцией, как это показано на рис. 7а. По квантовым соображениям вероятность рассеяния электронов и соответствующая ВАХ должны иметь вид, показанный на рис. 76.

Согласно формуле (11), по измеренной ВАХ тиратрона можно определить зави-

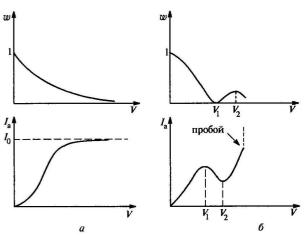


Рис. 7. Вероятность рассеяния электрона атомом инертного газа и ВАХ тиратрона при классическом (а) и квантовом (б) рассмотрении

симость вероятности рассеяния электрона от его энергии из соотношения

$$w(V) = -\frac{1}{C} \ln \frac{I_a(V)}{I_0}.$$
 (12)

Принципиальная схема установки для изучения эффекта Рамзауэра приведена на рис. 8. На лампу Л подаётся синусоидальное напряжение частоты 50 Гц от источника питания ИП, С — стабилизированный блок накала катода; исследуемый сигнал подаётся на электронный осциллограф (ЭО); цифрами обозначены номера ножек лампы.

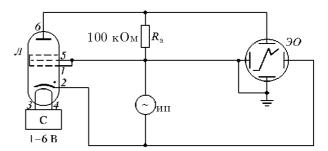


Рис. 8. Схема включения тиратрона

Реально на экране 90 удаётся надёжно наблюдать лишь один (первый, при n=1) минимум в сечении рассеяния электронов и следующий за ним максимум. Дело в том, что уже при n=2 напряжённость поля столь велика, что с большой вероятностью происходит ионизация атомов и возникает пробой тиратрона. Поэтому измерения проводятся при пониженных величинах накала тиратрона. Кроме того, как показывает расчёт, с ростом n глубина минимума резко уменьшается, что приводит к не столь ярко выраженному эффекту «просветления» газа.

Схема экспериментальной установки, изображённая на рис. 8 в нашей работе конструктивно осуществлена следующим образом. Лампа-тиратрон $T\Gamma$ 3-01/1.3Б, заполненная инертным газом, расположена непосредственно на корпусе

блока источников питания (БИП). Напряжение к электродам лампы подаётся от источников питания, находящихся в корпусе прибора. Регулировка напряжения и выбор режима работы установки производится при помощи ручек управления, выведенных на лицевую панель БИП (рис. 9).

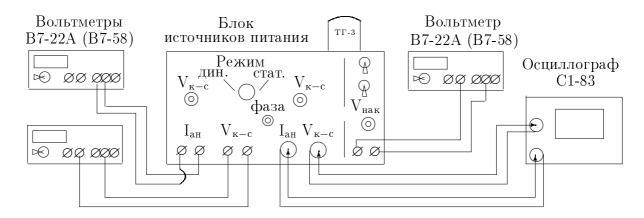


Рис. 9. Блок-схема экспериментальной установки

ЗАДАНИЕ

В работе предлагается: получить ВАХ эффекта на экране ЭО, измерить расстояния между характерными точками в вольтах; снять ВАХ в статическом режиме; по результатам измерений рассчитать размер электронной оболочки атома, оценить глубину потенциальной ямы и потенциал ионизации газа, заполняющего лампу.

І. Подготовка приборов к работе

- 1. Установите все ручки регулировки на блоке питания в крайнее левое положение и включите блок в сеть.
- 2. Убедитесь, что сигнал « $V_{\text{катод-сетка}}$ » с выхода прибора подан на вход «X» ЭО (канал I), а с выхода « $I_{\text{анода}}$ » на вход «Y» (канал II).
- 3. Включите осциллограф в сеть (ручку «питание» на себя).
- 4. На канале I (ось X) установите ступенчатый переключатель в положение 0,2 V/дел, утопите соседнюю кнопку « $\times 10$ », ручку плавного усиления поверните по часовой стрелке до щелчка. В этом случае цена горизонтального деления на экране составляет 2 B.
- 5. На канале II (ось Y), измеряющем напряжение, пропорциональное току лампы, установите чувствительность, равную $2\text{mV}/\text{дел} \times 10 = 20\text{mV}/\text{дел}$. (1 дел. \neq 1 см!).
- 6. Утопите клавиши «x-y» слева и справа от экрана осциллографа режим внешней развёртки.
- 7. Установите переключатели « \perp » в положение (\sim) закрытый вход на обоих каналах.

- 8. Ручками «↔» (вверху, справа от экрана) и «↓» (II канал) установите луч несколько правее от центра экрана.
- 9. Убедитесь, что напряжение накала подано на клеммы «общий» (О или *) и «1000 В» вольтметра; выберите режим измерения постоянного напряжения (кнопка «-»), диапазон «20 В» и включите вольтметр в сеть (у В7-22А тумблер на передней панели, у В7-58 кнопка справа на задней стенке).

II. Вольт-амперная характеристика тиратрона $I_{\rm a}=f(U_{\rm c})$ на экране осциллографа C1-83

- 1. Поставьте переключатель «РЕЖИМ» в положение «ДИНАМИЧ».
- 2. Установите напряжение накала дампы в диапазоне 2,5–3 В (ручка « $V_{\text{накала}}$ »).
- 3. Проследите за ходом ВАХ тиратрона на экране ЭО при увеличении ускоряющего напряжения « $V_{\rm катод-сетка}$ » от 0 до тах. Имейте ввиду, что развёртка вольтамперной характеристики на экране осциллографа производится справа налево. Ручкой «ФАЗА» (на БИП) можно сводить и разводить прямой и обратный ход характеристик.

На характеристике должны быть видны максимум, минимум и начало второго максимума с переходом на пробой тиратрона.

- 4. Перемещая сигнал ручками « \leftrightarrow » и « \uparrow » и меняя чувствительность канала Y, добейтесь размещения картины в центре экрана.
- 5. При максимальном ускоряющем напряжении измерьте на экране напряжения между катодом и сеткой, соответствующие первому максимуму и минимуму на осциллограмме. (ΔV в вольтах при установке ручки плавной регулировки на максимум до щелчка). «Ноль» по оси «X» определяется при заземлении входа «X» [движок в положении «земля» между открытым (\simeq) и закрытым (\sim) входами].

Оцените напряжение пробоя, соответствующее резкому скачку тока в конце кривой.

- 6. Зарисуйте на кальку осциллограмму, о́си X и Y, деления на оси X (1 дел. = 1,25 см); запишите (на кальке) чувствительность канала X в V/дел, напряжение накала. Отметьте точку пробоя.
- 7. Повторите измерения BAX тиратрона при другом значении напряжения накала в интервале 2,5–3 B.
- 8. Поднесите к лампе постоянный магнит. Магнитное поле влияет на эффект Рамзауэра, так как оно отклоняет любой электрон, испытавший упругое столкновение. Убедитесь, что это влияние зависит от ориентации магнита относительно оси тиратрона.
- 9. Прежде, чем перейти к измерениям в статическом режиме, выключите ЭО и верните все ручки регулировки БИП на min.
 - III. Вольт-амперная характеристика $I_{
 m a}=f(U_{
 m c})$ в статическом режиме.
- 1. Переведите переключатель «РЕЖИМ» в положение «СТАТИЧ».

- 2. Убедитесь, что напряжение « $V_{\rm катод-сетка}$ » подано на клеммы «0– $1000~{\rm B}$ » вольтметра, выберите режим измерения постоянного напряжения, диапазон « $20~{\rm B}$ » и включите вольтметр в сеть.
- 3. Убедитесь, что сигнал с клемм $I_{\rm a}$ подан на клеммы «0–2 В» вольтметра, выберите режим измерения постоянного напряжения (кнопки «-» и «V», диапазон «200 мВ» и включите вольтметр в сеть.

Ток анода $I_{\rm a}$ определяется по показанию вольтметра ($V_{\rm ahoq-cetka}$), делённому на сопротивление 100 кОм, которое включено в цепь анода.

- 4. Проведите измерение BAX тиратрона для 2-х значений напряжения накала (тех же, что в дин. режиме). Особенно тщательно (медленно) необходимо провести измерения в областях максимума и минимума характеристики.
- 5. Закончив работу, установите регуляторы БИП на min и отключите все приборы.

IV. Обработка результатов

1. По результатам измерений в дин. режиме рассчитайте размер электронной оболочки атома инертного газа, заполняющего лампу, приняв $U_0 = 2.5$ В [см. ф-лы (7а) и (7б) в практикуме 3-го курса.

Следует иметь в виду, что из-за наличия контактной разности потенциалов измеренное напряжение V не является истинным.

Рассчитайте размер электронной оболочки атома по ф-ле (8), исключив U_0 . Сравните результаты расчётов. Оцените размер электронной оболочки атома этого газа и сравните его с табличным значением.

- 2. Оцените глубину потенциальной ямы по формуле (9).
- 3. По результатам измерений напряжения пробоя оцените потенциал ионизации инертного газа. Каким газом наполнен тиратрон? Ионизационный потенциал аргона -15.8 эB, криптона -14 эB, ксенона -12.1 эB.
- 4. Постройте графики $I_{\rm a}=f(V_{\rm c})$ для статического режима. По графикам проведите те же расчёты, что и в динамическом режиме.
- 5. Оцените, используя ф-лу (7)

$$k_2 l = \sqrt{\frac{2m(E_n + U_0)}{\hbar^2}} l = n\pi, \quad n = 1, 2, 3,$$
 (7)

при каких напряжениях должны появляться максимумы в коэффициенте прохождения электронов для n=2,3 [найдите зависимость $E_n=f(E_1,n)$]. Сравните полученные величины с наблюдаемыми особенностями на BAX тиратрона.

6. На основе формулы (12) найдите зависимость вероятности рассеяния электронов (с точностью до константы) от энергии и постройте соответствующий график (см. рис. 76).

Исправлено 26-VI-2011